

PRINCE MEDICAL
DEVICES



Fabricant de Dispositifs Médicaux
GYNÉCOLOGIE & PROCRÉATION
MÉDICALEMENT ASSISTÉE

PRINCE MEDICAL

DEVICES

3 Sites de production
en France et en Tunisie

10 000 m² de surface couverte
dont 3 000 m² en salles propres

15 Millions de produits fabriqués par an

L'expertise réglementaire
de PRINCE MEDICAL permet de répondre
parfaitement aux normes actuelles et
d'anticiper leur évolution. PRINCE MEDICAL
témoigne d'une longue expérience dans
l'enregistrement des produits sur de nombreux
marchés à l'international.

PRINCE MEDICAL, certifiée NF EN ISO 13485, conçoit et fabrique des dispositifs médicaux à usage unique pour la Gastro-entérologie, la Gynécologie et la Procréation Médicalement Assistée.

Avec près de 30 ans d'expertise sur le marché de la Santé, l'entreprise s'appuie sur un savoir-faire technique en extrusion de thermoplastiques et polymères, et dispose d'équipements de pointe pour répondre aux besoins de marchés aux applications exigeantes.

La parfaite maîtrise de tous les processus industriels (*moulage, extrusion, production de ballonnets en latex et silicone, assemblage des matières plastiques et composants acier, découpe laser, soudure ultrasons et laser, marquage, conditionnement, stérilisation, ...*) est la garantie d'un haut niveau de qualité des produits PRINCE MEDICAL.

PRINCE MEDICAL est une filiale du Groupe international OMERIN et bénéficie de la dynamique de ses 1 700 collaborateurs.



PRINCE MEDICAL propose une gamme étendue de dispositifs médicaux de classe IIb, classe IIa, classe I stérile et classe I non stérile principalement destinés aux domaines de :

- **La Gastro-entérologie** : cathéters à ballonnets, aiguilles à injection, brosses de nettoyage pour endoscopes ...
- **La Gynécologie** : pinces gynécologiques (pinces de Chéron, pinces de Pozzi, ...), spéculums, sondes de prélèvement histologique...
- **La Procréation Médicalement Assistée PMA** : cathéters de transfert d'embryons, cathéters pour insémination intra utérine, aiguille de ponction d'ovocytes...

PRINCE MEDICAL fabrique également pour le compte de ses clients des dispositifs médicaux destinés à l'urodynamique, à l'anesthésie réanimation, à l'oxygénothérapie ainsi que des lignes externes destinées à la perfusion et l'injection de produit de contraste en radiologie.

L'entreprise fabrique et conditionne sous environnement contrôlé et dispose de nombreuses salles grises et salles blanches classées ISO7 et ISO8, gage d'une haute sécurité de ses produits.

Les équipes commerciales et techniques de PRINCE MEDICAL œuvrent avec passion pour mettre l'innovation, le service et la flexibilité au service de sa clientèle.

www.prince-medical.com



NOS SOLUTIONS



ENDOSCOPIE
DIGESTIVE
ET BRONCHIQUE

ENDOLINE®
ECHO HOOD®
OXYCAP®

ÉCOUVILLONS
ET BROSSES
DE NETTOYAGE

CLEANBRUSH®



GYNÉCOLOGIE
PM-CARE®

PROCRÉATION
MÉDICALEMENT
ASSISTÉE (PMA)

PM-LIFE®

GYNÉCOLOGIE

PRÉLÈVEMENT, FROTTIS ET BIOPSIE

- Brosse pour frottis PM-CARE® ENDOEXOPage 8
- Pince à biopsie PM-CARE® FORBIOPSPage 9
- Brosse de prélèvement PM-CARE® BRUSH.....Page 10
- Sonde de prélèvement histologique PM-CARE® ENDOBIOPS. Page 11

POSE ET RETRAIT DE DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN (DIU)

- Ciseaux coupe-fil PM-CARE® EASYCUTPage 13
- Pince d'extraction de stérilet PM-CARE® REMOVPage 14
- Set de pose de stérilet PM-CARE® INSERT-KITPage 15
- Set de retrait de stérilet PM-CARE® REMOV-KITPage 16
- Crochet pour stérilet PM-CARE® RETRIEVALPage 17
- Speculum PM-CARE® SPECULUMPage 24
- Hystéromètre PM-CARE® HYSTEROMETREPage 25
- Pince de Pozzi PM-CARE® POZZIPage 26
- Pince de Chéron PM-CARE® CHERONPage 27

HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE

- Cathéter pour hystérographie et hystérosonographie
1 voie rigide avec mousse PM-CARE® 1V-STDPage 19
- Cathéter pour hystérographie et hystérosonographie
2 voies rigide avec cupule PM-CARE® 2V-CUPPage 20
- Cathéter pour hystérographie et hystérosonographie
3 voies malléable avec ballon PM-CARE® 3V-BALLOONPage 21
- Prolongateur pour cathéter pour hystérographie
et hystérosonographie PM-CARE® EXTENDPage 22

EXPLORATION FONCTIONNELLE

- Speculum PM-CARE® SPECULUMPage 24
- Hystéromètre PM-CARE® HYSTEROMETREPage 25
- Pince de Chéron PM-CARE® CHERONPage 26
- Pince de Pozzi PM-CARE® POZZIPage 27

PMA (PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE)

INSÉMINATION INTRA-UTÉRINE

- Dispositif pour aspiration / injection PM-LIFE® PRELEVINJECPage 30
- Cathéter pour insémination PM-LIFE® IUPage 31
- Cathéter de transfert d'embryon PM-LIFE® FIV IUPage 32
- Set de transfert d'embryon PM-LIFE® TRANS SETPage 33

PONCTION OVOCYTAIRE

- Aiguille de ponction d'ovocytes PM-LIFE® OVO-PUNC.....Page 35
- Set de ponction d'ovocytes PM-LIFE® OVO-KITPage 36

GYNÉCOLOGIE

PRÉLÈVEMENT, FROTTIS ET BIOPSIE	7
POSE ET RETRAIT DE DISPOSITIFS INTRA-UTÉRIN (DIU)	12
HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE	18
EXPLORATION FONCTIONNELLE	23


PRÉLÈVEMENT, FROTTIS ET BIOPSIE

- **PM-CARE® ENDOEXO** BROSSE POUR FROTTIS 8
- **PM-CARE® FORBIOPS** PINCE À BIOPSIE 9
- **PM-CARE® BRUSH** BROSSE DE PRÉLÈVEMENT 10
- **PM-CARE® ENDOBIOPS** SONDE DE PRÉLÈVEMENT HISTOLOGIQUE 11

PM-CARE® ENDOEXO

8

BROSSE POUR FROTTIS

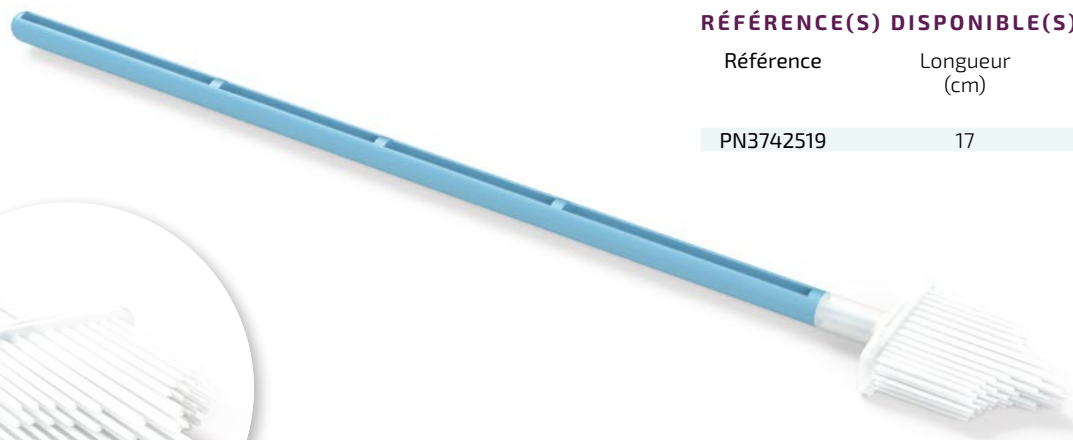

La brosse pour frottis **PM-CARE® ENDOEXO** est une brosse pour frottis cervico vaginal permettant de réaliser simultanément le prélèvement des cellules de l'endocol et de l'exocol.

ATOUTS

- Un prélèvement indolore et en toute sécurité pour la patiente.
- Manche long pour un prélèvement facile et une prise en main aisée.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Longueur (cm)
PN3742519	17

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2013
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	Non
Mode de stérilisation	Non (décontamination à l'oxyde d'éthylène)
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités (deux sachets de 25)
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® FORBIOPS

PINCE À BIOPSIE

9



La pince à biopsie **PM-CARE® FORBIOPS** permet de réaliser des biopsies sur des zones suspectes du col utérin.

ATOUTS

- Manche en forme de paire de ciseaux pour une prise en main facile.
- Prélèvement aisé grâce aux mors de la pince.
- Poussoir détachable permettant la récupération facile du prélèvement.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Longueur (cm)
PS3600025	26

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2013
Usage unique	Oui
Classe	Ila
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® BRUSH

10

BROSSE DE PRÉLÈVEMENT



**SÉCABLE
POUR FACILITER L'ENVOI
AU LABORATOIRE**

La brosse de prélèvement **PM-CARE® BRUSH** permet de réaliser l'écouvillonnage cytologique de l'endocol lors d'un examen gynécologique. Il s'agit d'une brosse cytologique permettant de réaliser des prélèvements, par rotation, des cellules du col de l'utérus dans le but de diagnostiquer d'éventuelles pathologies.

ATOUTS

- Extrémité distale atraumatique.
- Manche long pour un prélèvement facile et une prise en main aisée.
- Partie détachable pour récupérer facilement le prélèvement et l'envoi au laboratoire (références **PM-CARE® BRUSH** sécables).
- Configuration conique de la brosse pour un accès aux ouvertures étroites pour les références coniques.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre de la brosse (mm)	Forme de la brosse	Stérile	Sécable
PS1643520	3.5	Droite	oui	-
PS3653520	3.5	Droite	oui	oui
PN1643520	3.5	Droite	-	-
PN3653520	3.5	Droite	-	oui
PS1655020	5	Conique	oui	-
PS3665020	5	Conique	oui	oui
PN1655020	5	Conique	-	-
PN3665020	5	Conique	-	oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	*Oui (PS1643520, PS1655020, PS3653520, PS3665020) Non (PN1643520, PN1655020, PN3653520, PN3665020)
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités, les brosses stériles sont conditionnées dans un emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com


PRINCE MEDICAL
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

* Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® ENDOBIOPS

SONDE DE PRÉLÈVEMENT HISTOLOGIQUE

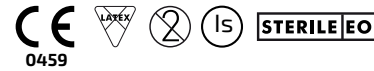

La sonde de prélèvement histologique **PM-CARE® ENDOBIOPS** permet d'effectuer des prélèvements histologiques de l'endomètre.

ATOUTS

- Graduations centimétriques pour un meilleur contrôle de l'insertion de la sonde.
- Extrémité atraumatique permettant une introduction sans gêne dans le canal cervical.
- Embout de préhension rigide et cranté pour une bonne prise en main.
- Aspiration efficace assurée par une pression négative.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Modèle	Diamètre (mm / Fr)	Longueur (cm)
PS1200923	STANDARD	3 / 9	23
PS1210626	MINI	2 / 6	27
PS1220627	COURBE	2 / 6	27
PS3490923	PLUS	3 / 9	23

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2001
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)



STANDARD



MINI

- Pour les patientes présentant un col utérin ou un canal cervical étroit
- Pour les patientes post-ménopausées



COURBE

- Pour les prélèvements d'un côté latéral de l'endomètre
- Pour les patientes présentant un utérus de forme non conventionnelle



PLUS

- Pour améliorer la qualité du prélèvement
- Pour faire deux prélèvements distincts

GYNÉCOLOGIE


POSE ET RETRAIT DE DISPOSITIFS INTRA-UTÉRIN (DIU)

- **PM-CARE® EASYCUT** CISEAUX COUPE-FIL 13
- **PM-CARE® REMOV** PINCE D'EXTRACTION DE STÉRILET 14
- **PM-CARE® INSERT-KIT** SET DE POSE DE STÉRILET 15
- **PM-CARE® REMOV-KIT** SET DE RETRAIT DE STÉRILET 16
- **PM-CARE® RETRIEVAL** CROCHET POUR STÉRILET 17
- **PM-CARE® SPECULUM** 24
- **PM-CARE® HYSTEROMETRE** 25
- **PM-CARE® POZZI** PINCE DE POZZI 26
- **PM-CARE® CHERON** PINCE DE CHÉRON 27

PM-CARE® EASYCUT

CISEAUX COUPE-FIL

13

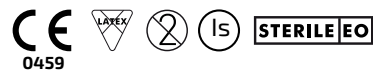


Les ciseaux coupe-fil **PM-CARE® EASYCUT** permettent de couper les fils lors de la pose d'un dispositif intra-utérin. Le choix de l'utilisation d'une paire de ciseaux coupe-fil latéral ou distal reste celui du praticien en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Modèle
PS3220022	LATÉRAL
PS3580022	DISTAL

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

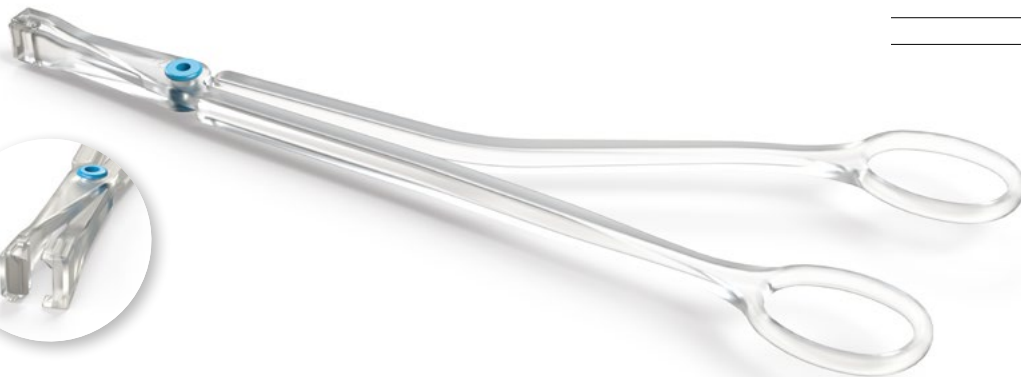

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

PM-CARE® REMOV

14

PINCE D'EXTRACTION DE STÉRILET



La pince d'extraction de stérilet **PM-CARE® REMOV** est utilisée au cours d'un examen gynécologique :

- Lors du retrait d'un dispositif intra-utérin. Elle permet de maintenir les fils du dispositif et de le tirer vers le bas pour l'extraire.
- En cas de pose d'un nouveau dispositif. Elle permet de maintenir une compresse pour désinfecter et nettoyer la zone de travail et/ou le col de l'utérus souillés par l'extraction et de préparer la mise en place du nouveau dispositif.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Longueur (cm)
PS3570025	25

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® INSERT-KIT

SET DE POSE DE STÉRILET

15



PINCE DE CHÉRON

PINCE DE POZZI
DROITECISEAUX COUPE
FIL DISTAL

HYSTÉROMÈTRE

Le set de pose de stérilet **PM-CARE® INSERT-KIT** permet de poser un dispositif intra-utérin dans la cavité intra-utérine. Il est composé d'une pince de Pozzi, d'une pince de Chéron, d'une paire de ciseaux coupe-fil et d'un hystéromètre.

COMPOSITION DU SET DE POSE DE STÉRILET :

- La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une "traction-fixation" sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°. Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors de l'introduction d'instruments et de la pose du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer l'utérus.
- La pince de Chéron coudée permet de nettoyer l'utérus et la zone de travail.
- Les ciseaux coupe-fil latéral ou distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin. Le choix de l'utilisation d'une paire de ciseaux coupe-fil latéral ou distal reste celui du praticien en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.
- L'hystéromètre permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	PINCE DE POZZI Modèle	PINCE DE CHÉRON Modèle	CISEAUX COUPE-FIL Modèle	HYSTÉROMÈTRE Diamètre (Fr)
PS4190000	Droite	Coudée	Distal	(non fourni)
PS3840000	Droite	Coudée	Distal	14
PS3230000	Droite	Coudée	Latéral	14

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
DEVICES

PM-CARE® REMOV-KIT

16

SET DE RETRAIT DE STÉRILET




PINCE
D'EXTRACTION



PINCE DE POZZI
DROITE



CISEAUX COUPE
FIL DISTAL

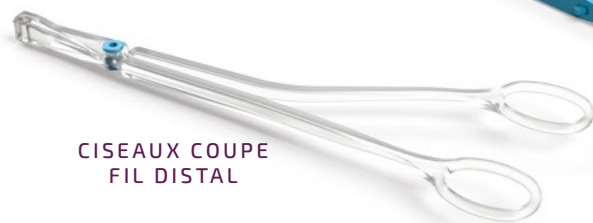

HYSTÉROMÈTRE



Le set de retrait de stérilet **PM-CARE® REMOV-KIT** permet l'extraction d'un dispositif intra-utérin de la cavité utérine. Il est composé d'une pince de Pozzi, d'une pince d'extraction, d'une paire de ciseaux coupe-fil et d'un hystéromètre.

COMPOSITION DU SET DE RETRAIT DE STÉRILET :

- La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une "traction-fixation" sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°. Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors du retrait du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer l'utérus.
- La pince d'extraction de stérilet permet de retirer en douceur et de nettoyer l'utérus et la zone de travail.
- Les ciseaux coupe-fil distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin.
- L'hystéromètre permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	PINCE DE POZZI Modèle	PINCE D'EXTRACTION Fournie	CISEAUX COUPE-FIL Modèle	HYSTÉROMÈTRE Diamètre (Fr)
PS3620000	Droite	Oui	Distal	14

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
DEVICES


Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® RETRIEVAL

CROCHET POUR STÉRILET

17

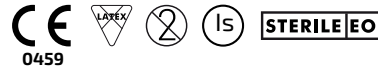

Le crochet pour stérilet PM-CARE® RETRIEVAL permet la récupération des fils d'un stérilet qui ont été perdus dans le canal endocervical ou dans la cavité utérine ainsi que l'extraction du stérilet si nécessaire.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Longueur (mm)
PS3830026	263



INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2014
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

GYNÉCOLOGIE


HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE

- **PM-CARE® 1V-STD** CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 1 VOIE RIGIDE AVEC MOUSSE 19
- **PM-CARE® 2V-STD** CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 2 VOIES RIGIDE AVEC CUPULE 20
- **PM-CARE® 3V-BALLOON** CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 3 VOIES MALLÉABLE AVEC BALLON 21
- **PM-CARE® EXTEND** PROLONGATEUR POUR CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 22

PM-CARE® 1V-STD

CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 1 VOIE RIGIDE AVEC MOUSSE

19

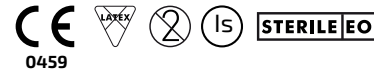

Le cathéter pour hystéro 1 voie rigide avec mousse **PM-CARE® 1V-STD** permet de réaliser des hystérogaphies et hystérosonographies tout en assurant l'étanchéité au cours de l'examen. Le cathéter coulissant permet par ailleurs de remonter plus haut dans la cavité utérine pour l'injection.

ATOUTS

- Manipulation aisée et simple.
- Étanchéité assurée en positionnant la mousse contre le col de l'utérus.
- Facilité d'injection du produit.
- Insertion atraumatique.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Diamètre de la mousse (mm)	Longueur (mm)	Cathéter coulissant
PS1870733	2,45 / 7,5	15	330	-
PS2010733	2,45 / 7,5	25	330	-
PS2020733	1,5 / 4,5	15	340	oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2004 2005 pour la référence PS2020733
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

COULISSANT

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuil - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

PM-CARE® 2V-CUP

20

CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 2 VOIES RIGIDE AVEC CUPULE



Le cathéter pour hystero 2 voies rigide avec cupule **PM-CARE® 2V-CUP** permet de réaliser des hystérogrophies, des hystérosonographies, ainsi que des tests au bleu de méthylène.

ATOUTS

- La cupule en forme de cloche est axée sur un noyau central permettant une adhésion parfaite du dispositif, le processus de ventouse est obtenu en pratiquant une mise sous vide progressive.
- Le manipulateur rigide et déformable permet au radiologue de manipuler l'utérus.
- Les deux voies peuvent être obturées à l'aide d'un robinet Luer lock. Le tube gradué mobile permet de réaliser l'injection à l'endroit souhaité.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Taille des cupules disponibles (mm)	Longueur (mm)
PS3460845	2,80 / 8,5	23, 28 et 35 (3 tailles fournies)	400
PS4292340	2,80 / 8,5	23	400
PS4292840	2,80 / 8,5	28	400
PS4293540	2,80 / 8,5	35	400

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2012
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES


Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® 3V-BALLOON

CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 3 VOIES MALLÉABLE AVEC BALLON

21

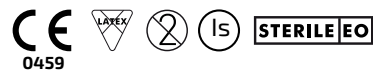

Le cathéter pour hystero 3 voies malléable avec ballon **PM-CARE® 3V-BALLOON** permet de réaliser des hystérogaphies et des hystérosonographies. Ce cathéter malléable peut être courbé et mis en forme pour s'adapter à l'anatomie de la patiente.

ATOUTS

- Manipulation aisée et simple.
- Etanchéité assurée grâce aux performances du ballonnet en silicone.
- Connecteur standard permettant de brancher une seringue pour l'injection du produit.
- Insertion atraumatique.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Diamètre du ballonnet gonflé (mm)	Ballonnet insufflation maxi de gaz (cc)	Longueur (mm)
PS3310733	2,66 / 8	13	2,5	230

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

PM-CARE® EXTEND

22

PROLONGATEUR POUR CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE



Le prolongateur pour cathéter hystero **PM-CARE® EXTEND** se raccorde aux cathéters pour hystérographie et hystérosonographie afin de permettre le prolongement de leur voie d'injection pour une utilisation plus aisée par le praticien.

ATOUTS

- Manipulation aisée et simple.
- Longueur adaptée à l'utilisation prévue.
- Connecteur standard permettant une connexion aisée et ajustée.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (cm)
PS0700014	2	140
PS0700002	2	20

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	Réf PS0700014 : 2002 Réf PS0700002 : 2016
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

EXPLORATION FONCTIONNELLE

- **PM-CARE® SPECULUM** 24
- **PM-CARE® HYSTEROMETRE** 25
- **PM-CARE® CHERON** PINCE DE CHÉRON 26
- **PM-CARE® POZZI** PINCE DE POZZI 27

PM-CARE® SPECULUM

24

SPECULUM CUSCO OU COLLIN



Le spéculum **PM-CARE® SPECULUM** permet d'explorer, de visualiser et d'examiner le col utérin, le vagin en donnant accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens et interventions chirurgicales. Le spéculum de Collin permet l'introduction de dispositifs plus volumineux. Le **PM-CARE® SPECULUM** est fabriqué à partir de matière thermoplastique médicale de très haute qualité.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Modèle	Taille	Diamètre (mm)	Couleur
PS3592000	Cusco	XS	20	Blanc
PS3592400	Cusco	S	24	Bleu
PS3592600	Cusco	M	26	Rouge
PS3593000	Cusco	L	30	Vert
PS3932700	Collin	S	27	Blanc
PS3933000	Collin	M	33	Vert

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	Speculum Cusco : 2012 Speculum Collin : 2015
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	• Spéculum Cusco: boîte de 50 unités en emballage individuel stérile • Spéculum Collin: boîte de 35 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES


Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® HYSTEROMETRE

HYSTÉROMÈTRE

25

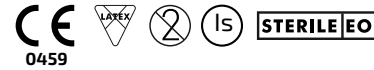

L'hystéromètre PM-CARE® HYSTEROMETRE permet d'apprécier la profondeur utérine dans le cadre d'examens gynécologiques, notamment pour la pose ou le retrait d'un dispositif de contraception.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre (Fr)	Diamètre (mm)	Couleur
PS1251000	10	3,3	Bleu
PS1251200	12	4	Gris
PS1251400	14	4,6	Vert



INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	1999
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 ou 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

PM-CARE® POZZI

26

PINCE DE POZZI



La pince de Pozzi **PM-CARE® POZZI** est utilisée lors d'un examen ou acte gynécologiques.

Les deux utilisations principales :

- Permet la préhension du col utérin afin de le fixer lors de certaines interventions telles que le cerclage (réduction de la béance du col), les biopsies (prélèvement de cellules) ou la conisation (résection chirurgicale d'un fragment conoïde du tissu du col utérin).
- Permet la réalisation d'une "traction-fixation" sur le col utérin afin d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°.

Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors de l'introduction d'instruments, lors de la pose ou du retrait d'un dispositif intra-utérin pour éviter le risque de perforer l'utérus.

La pince de Pozzi **PM-CARE® POZZI** peut être droite ou coudée afin de s'adapter à la forme de l'utérus concerné. Le choix de l'utilisation d'une pince droite ou coudée reste celui du praticien en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.



RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence Modèle de pince

PS3180025	Droite
PS3190025	Coudée

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS - Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-CARE® CHERON

PINCE DE CHÉRON

27




La pince de Chéron **PM-CARE® CHERON** est utilisée lors d'un examen gynécologique ou lors de la pose ou retrait d'un dispositif intra-utérin. Lors de consultations ou de soins gynécologiques, elle assure la préhension d'un pansement, d'un tampon ou d'une compresse, aseptisés et permet ainsi le badigeonnage de désinfectant et /ou le nettoyage du col de l'utérus ou de la zone de travail.

La pince de Chéron **PM-CARE® CHERON** peut être droite ou coudée afin de s'adapter à la forme de l'utérus concerné. Le choix de l'utilisation d'une pince droite ou coudée reste celui du praticien en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.



RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Modèle de pince
PS3200025	Droite
PS3210025	Coudée

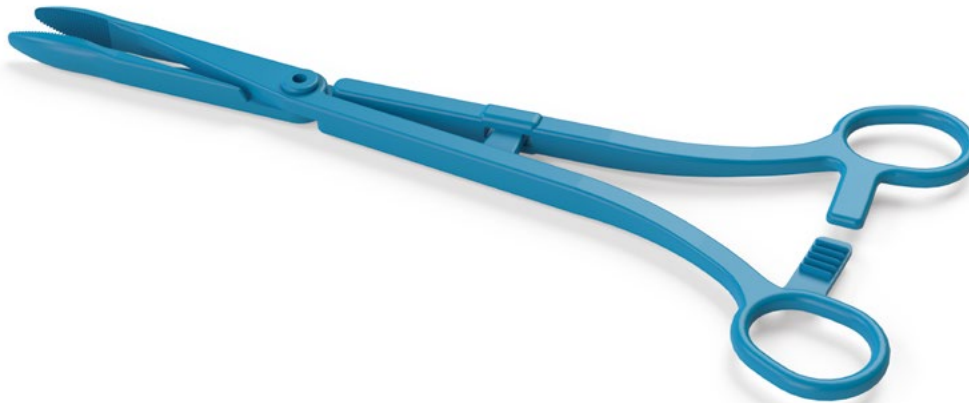

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec


PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuil - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PMA

INSÉMINATION INTRA-UTÉRINE
PONCTION OVOCYTAIRE

29

34

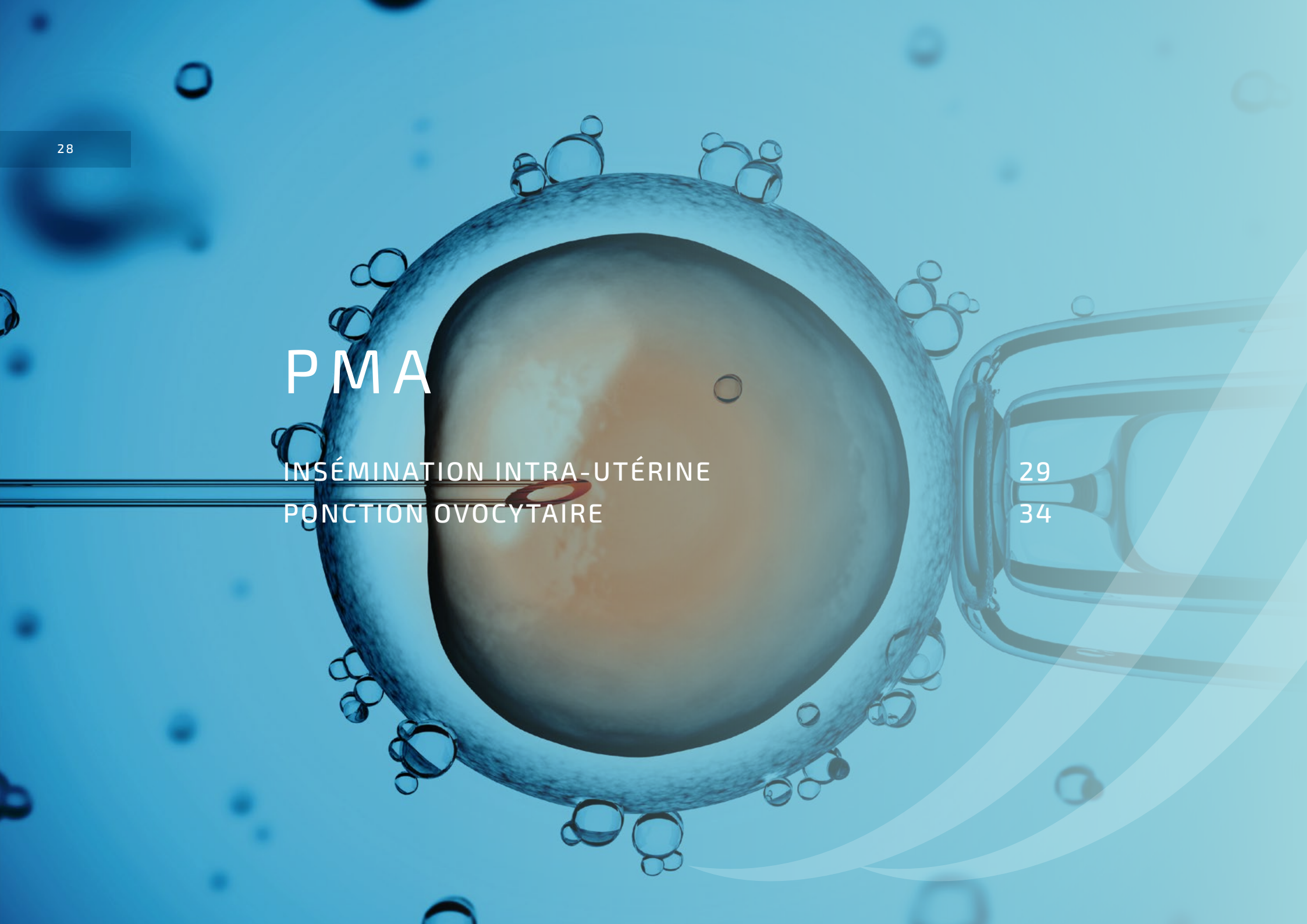

INSÉMINATION INTRA-UTÉRINE

- **PM-LIFE® PRELEVINJEC** DISPOSITIF POUR ASPIRATION / INJECTION 30
- **PM-LIFE® IU** CATHÉTER POUR INSÉMINATION 31
- **PM-LIFE® FIV IU** CATHÉTER DE TRANSFERT D'EMBRYON 32
- **PM-LIFE® TRANS SET** SET DE TRANSFERT D'EMBRYON 33

PM-LIFE® PRELEVINJEC

30

DISPOSITIF POUR ASPIRATION / INJECTION POUR I.I.U



Le dispositif pour aspiration / injection pour insémination intra-utérine **PM-LIFE® PRELEVINJEC** permet de réaliser l'introduction, sans seringue, de spermatozoïdes lavés et préparés dans la cavité utérine dans le cadre d'une insémination artificielle intra-utérine (I.I.U.) lors d'une procréation médicalement assistée (PMA).

ATOUTS

- Embout de préhension rigide et cranté pour une bonne prise en main.
- Extrémité atraumatique pour une introduction sans gêne dans le canal cervical.
- Contrôle optimal du flux de l'injection.
- Graduations indicatives de 1 à 5 (une graduation correspondant à environ 100 microlitres).

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre intérieur du cathéter (mm)	Diamètre extérieur du cathéter (mm / Fr)	Diamètre intérieur de la gaine rigide (mm)	Diamètre extérieur de la gaine rigide (mm / Fr)	Longueur du cathéter (mm)
PS1240623	0,8	2,00 / 6	2,65	3,10 / 9	230

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES



Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-LIFE® IU

CATHÉTER POUR INSÉMINATION

31

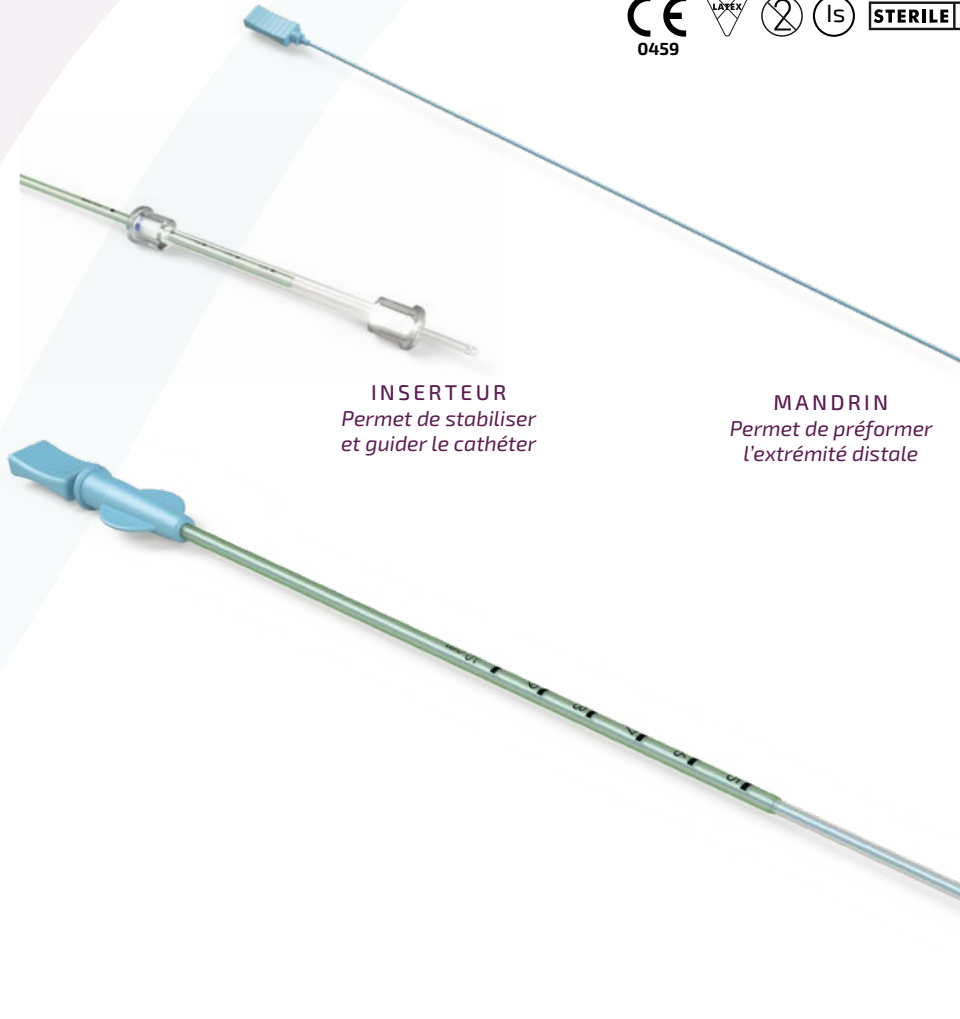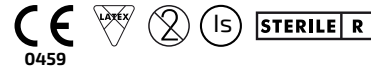

INSERTEUR
Permet de stabiliser
et guider le cathéter

MANDRIN
Permet de préformer
l'extrémité distale

Le cathéter pour insémination intra-utérine **PM-LIFE® IU** permet de réaliser une insémination de procréation médicalement assistée (PMA) en introduisant des spermatozoïdes lavés et préparés dans la cavité utérine. Certaines références peuvent être composées d'un inserteur permettant de stabiliser et guider le cathéter lors de l'insertion ou/et d'un mandrin permettant de préformer l'extrémité distale du cathéter afin de s'adapter à la morphologie de la patiente.

ATOUTS

- Graduations centimétriques pour un meilleur contrôle de l'insertion du cathéter.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Diamètre intérieur volume (mm / ml)	Diamètre des 2 trous latéraux (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur de la partie distale (mm)	Inserteur	Mandrin
PS1260500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	-	-
PS1270500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	Oui	-
PS4130500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	-	Oui
PS4160500	1,65 / 5	1,1 / 0,20	1	175	45	Oui	Oui
PS1260600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	-	-
PS1270600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	Oui	-
PS4130600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	-	Oui
PS4160600	2 / 6	1,6 / 0,40	1,3	175	45	Oui	Oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.


PM-LIFE® FIV IU

32

CATHÉTER DE TRANSFERT D'EMBRYON



ECHOGENE
Partie distale échogène
permettant une meilleure
visualisation sous
échographie

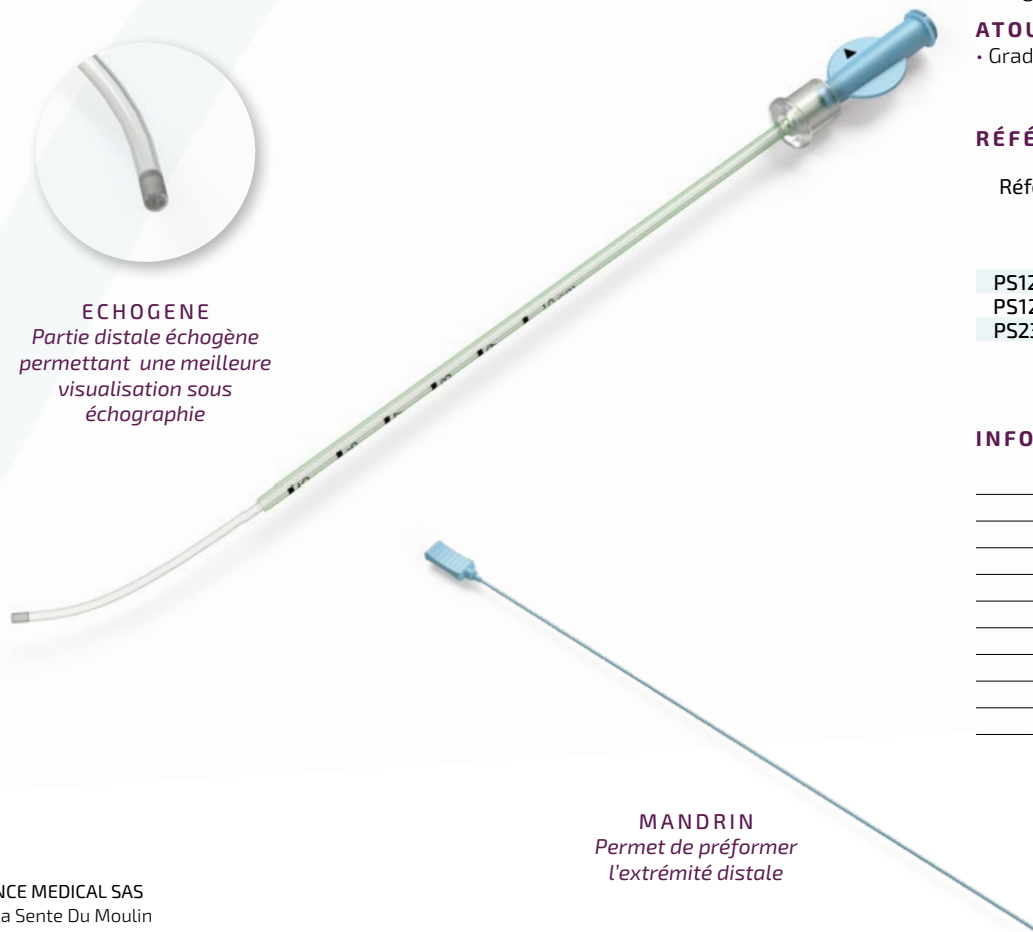

MANDRIN
Permet de préformer
l'extrémité distale

Le cathéter de transfert d'embryon **PM-LIFE® FIV IU** est utilisé pour l'insémination intra-utérine ou pour la réalisation d'une micro-injection (transfert d'embryons après une fécondation in vitro). Certaines références peuvent être composées d'un tube dépoli permettant une meilleure visualisation sous échographie ou d'un mandrin permettant d'adapter le cathéter à la morphologie de la patiente.

ATOUTS

- Graduations centimétriques et butée pour un meilleur contrôle de l'insertion du cathéter.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Diamètre intérieur / volume (mm / ml)	Dépassement du cathéter souple (mm)	Longueur utile (mm)	Tube dépoli	Mandrin
PS1280545	1,6 / 5	1,1 / 0,20	45	175	-	-
PS1280555	1,6 / 5	1,1 / 0,20	45	175	Oui	-
PS2380545	1,6 / 5	1,1 / 0,20	45	175	-	Oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-LIFE® TRANS SET

SET DE TRANSFERT D'EMBRYON

33



Le set de transfert d'embryon **PM-LIFE® TRANS SET** permet le transfert d'embryons fécondés "in vitro" dans la cavité utérine lors d'une procédure de procréation médicalement assistée (PMA).

COMPOSITION DU SET :

- Un cathéter d'introduction. Le modèle référence PS3800317 est composé d'une "olive" permettant une introduction atraumatique et fiable dans le col, surtout en cas de conditions anatomiques difficiles.
- Un cathéter de transfert d'embryon.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	CATHÉTER D'INTRODUCTION			CATHÉTER DE TRANSFERT				
	Diamètre (mm / Fr)	Longueur utile (mm)	Olive	Diamètre externe (mm / Fr)	Diamètre interne / volume (mm / ml)	Dépassement du cathéter de transfert (mm)	Diamètre du transfert (mm / Fr)	Longueur utile (mm)
PS1310517	2,0 / 6	160	-	1,5 / 5	1,1 / 0,20	30	1,5 / 5	190
PS1300317	1,6 / 5	175	-	1,0 / 3	0,6 / 0,10	28	1,0 / 3	203
PS3800317	1,6 / 5	175	Oui	1,0 / 3	0,6 / 0,10	57	1,0 / 3	232



OLIVE
Permet une introduction
atraumatique et fiable

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
DEVICES

PMA

PONCTION OVOCYTAIRE

- **PM-LIFE® OVO-PUNC** AIGUILLE DE PONCTION D'OVOCYTES 35
- **PM-LIFE® OVO-KIT** SET DE PONCTION D'OVOCYTES 36

PM-LIFE® OVO-PUNC**AIGUILLE DE PONCTION D'OVOCYTES**

35



L'aiguille de ponction d'ovocytes **PM-LIFE® OVO-PUNC** permet de réaliser une ponction échoguidée des follicules ovariens dans l'objectif d'une fécondation in vitro.

ATOUTS


- Partie distale échogène permettant une bonne visualisation du positionnement de l'aiguille par rapport au follicule.
- Ponction optimale grâce à la longueur de l'aiguille et la forme de son biseau.
- Obturation de l'aiguille par un mandrin lors de son insertion permettant la préservation des ovocytes de toute contamination.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre extérieur (mm / Gauge)	Diamètre intérieur (mm)	Longueur utile (cm)
PS1341530	1,5 / 17	1,2	30

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2002
Usage unique	Oui
Classe	Ila
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

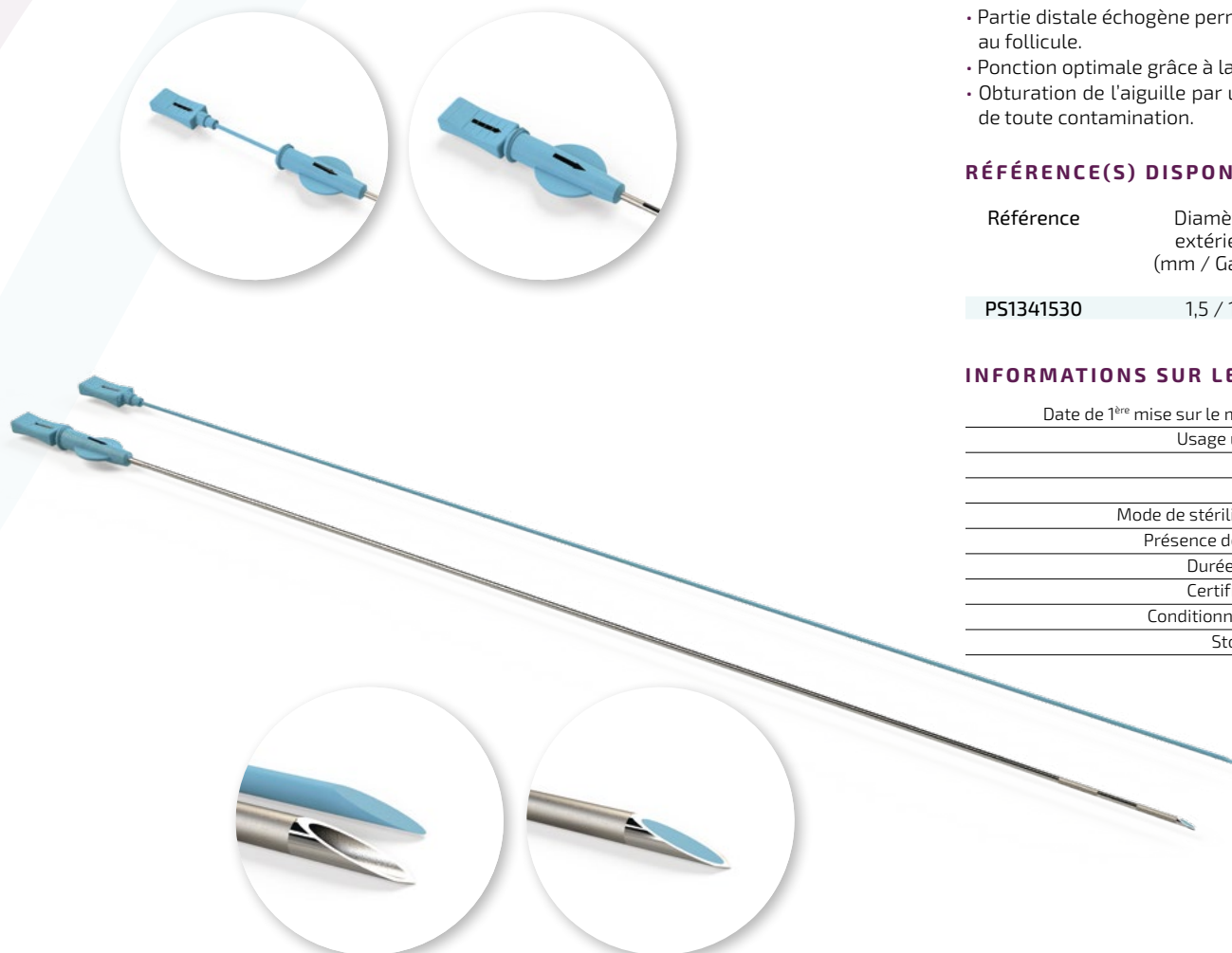

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceux - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com


Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PM-LIFE® OVO-KIT

36

SET DE PONCTION D'OVOCYTES

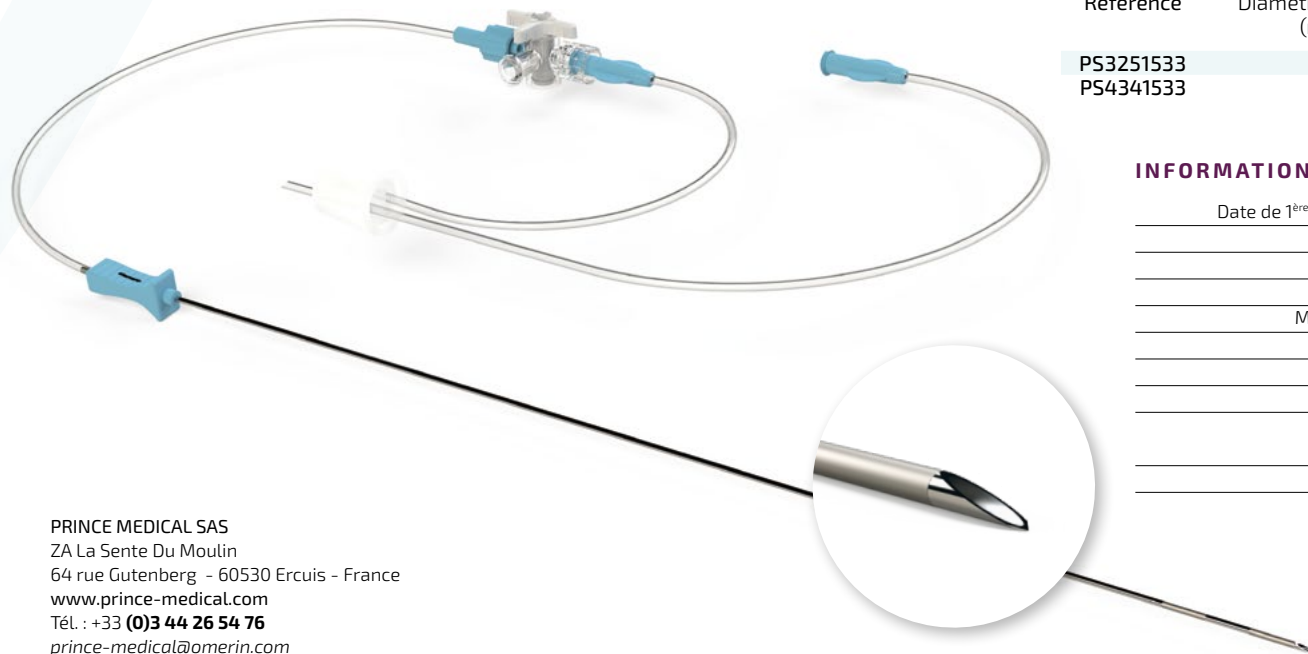

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
 www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
 prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Le set de ponction d'ovocytes **PM-LIFE® OVO-KIT** permet de réaliser une ponction échoguidée des follicules ovariens dans l'objectif d'une fécondation in vitro. La référence PS4341533 contient également un robinet (avec son embase de connexion Luer-lock mâle) permettant le rinçage folliculaire.

ATOUTS

- L'aiguille est en acier inoxydable triple biseau arrière comportant deux zones échogènes retenant les ultra-sons lors de l'échoguidage.

COMPOSITION DU SET :

- Une aiguille et son embase de fixation (avec tube protecteur).
- 2 ou 3 tubes avec leur(s) embases de connexion Luer Lock.
- 1 bouchon de type Falcon.
- Un robinet (uniquement pour la référence PS4341533).

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

AIGUILLE				
Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm / Gauge)	Longueur utile (cm)	Robinet
PS3251533	1,2	1,5 / 17	31,5	-
PS4341533	1,2	1,5 / 17	31,5	Oui

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2010
Usage unique	Oui
Classe	Ila
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé au rayonnement gamma
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	• Réf PS3251533 : boîte de 5 sets en emballage individuel stérile • Réf PS4341533 : boîte de 4 sets en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.



PRINCE  MEDICAL
D E V I C E S

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin - 64 rue Gutenberg
60530 Ercuis - France

www.prince-medical.com

Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com